



# ***E.B.M. Wijchen***

***Elektronische beschermende maatregelen  
voor zorginstellingen en thuis situatie,  
ten behoeve van valpreventie.***



**Postbus 302  
6600 AH Wijchen  
T: 024-6417224  
F: 024-6420202  
[info@ebm-wijchen.nl](mailto:info@ebm-wijchen.nl)  
[www.ebm-wijchen.nl](http://www.ebm-wijchen.nl)**



## **Bed alarm voor onder het matras**



Het bed alarm voor onder het matras is bedoeld voor situaties waarbij het valgevaar zeer groot is. Het bed alarm kan zo worden afgesteld dat het alarm afgaat voordat de persoon daadwerkelijk uit bed is. Het bed alarm is voorzien van een stelknop waarmee een vertraging ingesteld kan worden zodat vals alarm voorkomen kan worden. Het bed alarm dient ter hoogte van de schouders of heupen onder het matras te worden gelegd. Het snoer van het bed alarm wordt aan de zusteroproep gekoppeld.


Indien er geen zusteroproep aanwezig is kan er een akoestisch kastje worden aangesloten. Deze kan eventueel met behulp van een verlengsnoer in een ander ruimte worden geplaatst.

Het draadloze bedalarm voor onder de matras is speciaal voor een omgeving waar geen zusteroproep systeem en de afstand naar een ander ruimte te groot is om met behulp van een verlengsnoer te overbruggen. Het maximale bereik van dit systeem is 30m afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt.

- Bed alarm standaard
- Bed alarm akoestisch
- Draadloos Bed alarm



## **Bed alarm voor op het matras**

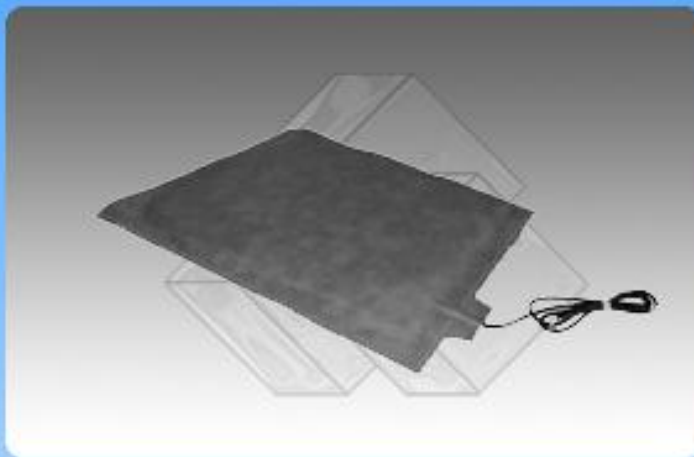

Het bed alarm voor op het matras is bedoeld voor situaties waarbij het valgevaar zeer groot is, en waar gebruik wordt gemaakt van een waterbed of een wisseldruk matras. In deze situaties werkt het bed alarm voor onder het matras niet. Het bed alarm voor op het matras heeft dezelfde instelmogelijkheden als het bed alarm voor onder het matras. Het bed alarm kan zo worden afgesteld dat het alarm afgaat voordat de persoon daadwerkelijk uit bed is. Het bed alarm is voorzien van een stelknop waarmee een vertraging ingesteld kan worden zodat vals alarm voorkomen kan worden. Het bed alarm dient ter hoogte van de schouders of heupen onder het matras te worden gelegd. Het snoer van het bed alarm wordt aan de zusteroproep gekoppeld.


Indien er geen zusteroproep aanwezig is kan er een akoestisch kastje worden aangesloten. Deze kan eventueel met behulp van een verlengsnoer in een ander ruimte worden gezet.

Het draadloze bedalarm voor op de matras is speciaal voor een omgeving waar geen zusteroproep systeem en de afstand naar een ander ruimte te groot is om met behulp van een verlengsnoer te overbruggen. Het maximale bereik van dit systeem is 30m afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt.

- Bed alarm standaard
- Bed alarm akoestisch
- Draadloos Bed alarm



## Vloermat alarm

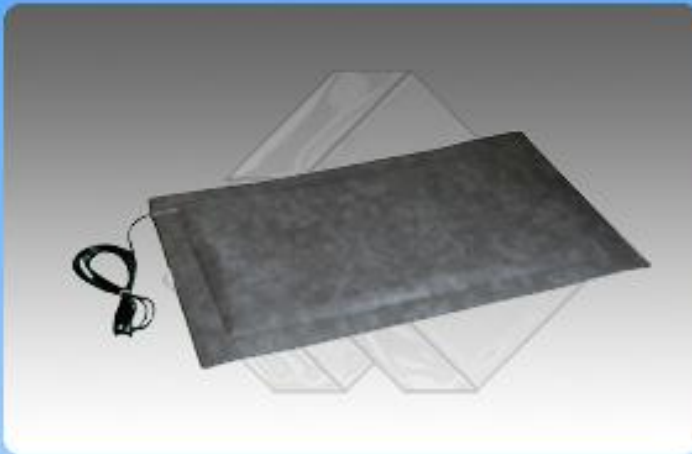

Het vloermat alarm is voor situaties waar het valgevaar minder hoog is. De vloermat wordt geplaatst op de grond in de te beveiligen ruimte. Dit kan naast het bed zijn of voor de deur. Het snoer van de vloermat wordt aan de zusteroproep gekoppeld. Wanneer de bewoner/patiënt op de vloermat stapt, zal via de zusteroproep het alarm afgaan.


Wanneer er geen zusteroproep aanwezig is, dient er tevens een elektronisch kastje met zoemer te worden aangeschaft. Dit kastje kan door middel van een verlengsnoer in een andere ruimte geplaatst worden.

Het draadloze vloermat alarm is speciaal voor een omgeving waar geen zusteroproep systeem aanwezig is en waar de afstand naar een ander ruimte te groot is om met behulp van een verlengsnoer te overbruggen. Het maximale bereik van dit systeem is 30m afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt.

- Vloermat alarm standaard
- Vloermat alarm Speciaal
- Draadloos vloermat alarm



## Stoelmat alarm

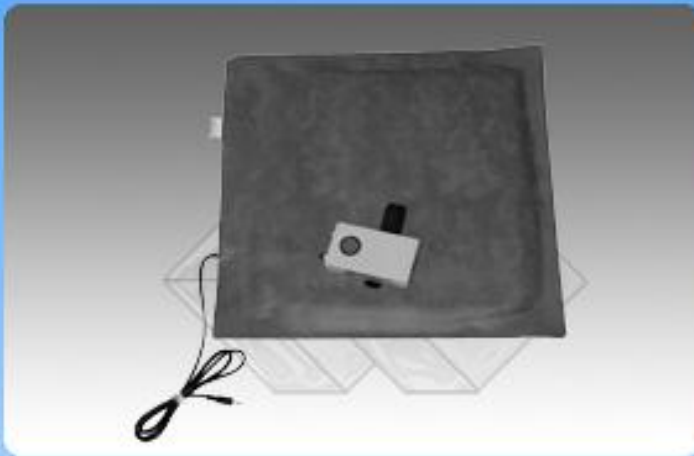

Het standaard stoelalarm kan in vrijwel elke stoel worden geplaatst. De sensormat wordt geplaatst op de zitting van de stoel, onder de stuit. Het elektronisch kastje kan bevestigd worden aan de achterkant van de (rol)stoel. Wanneer de bewoner/patiënt opstaat, en dus de druk op de sensormat vermindert of verdwijnt, zal na ongeveer 3 seconden (de vertraging om vals alarm te voorkomen is instelbaar) het alarm in werking treden. Het systeem werkt wordt gevoed door een batterij.


Het stoel alarm zusteroproep is gelijk aan het standaard stoelalarm maar kan op een zusteroproep worden aangesloten. Dit werkt echter niet in combinatie met een rolstoel.

Er is tevens een draadloze versie van het stoelalarm. Hierbij kan een akoestische kastje in een andere ruimte worden geplaatst. Het maximale bereik van dit systeem is 30m, afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt.

- Stoel alarm standaard
- Stoel alarm zusteroproep
- Draadloos stoel alarm



## **Anti glijmat**

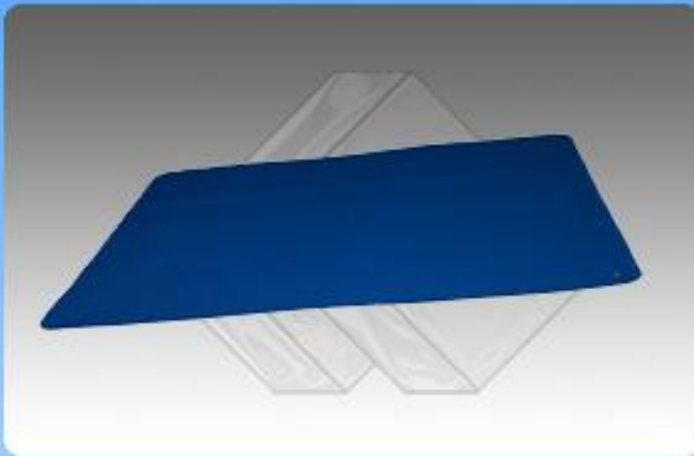

De anti glijmat.

Er zijn drie versies van de anti glijmat. De anti glijmatten zijn in eerste instantie bedoelt om te gebruiken in natte ruimtes, maar ze zijn ook te gebruiken in elke ruimte waar de ondergrond glad is zoals parket, laminaat, linoleum, zeil en tegels.

- Anti glijmat klein 50 x 70 cm
- Anti glijmat middel 60 x 80 cm
- Anti glijmat groot 80 x 100 cm